
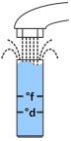
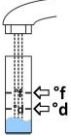
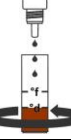


TEST KIT

EN	TOTAL WATERHARDNESS
FR	DURETÉ D'EAU TOTALE
DE	GESAMTWASSERHÄRTE
NL	TOTALE WATERHARDHEID
ES	DUREZA TOTALE D'AGUA
IT	DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA
SV	TOTALT VATTENHÅRDHET
TR	TOPLAM SU SERTLIĞI
ZH	水的整体硬度

①		EN	Rinse test tube with water
		FR	Rincer l'éprouvette avec de l'eau
		DE	Messröhrchen mit Wasser ausspülen
		NL	Testtube met water uitspoelen
		ES	Lavar la probeta con agua
		IT	Risciacquare la provetta con acqua
		SV	Skölj provröret med vatten
		ZH	用水将试管冲洗干净
②		EN	Fill test tube with water up to correct mark
		FR	Remplir l'éprouvette avec de l'eau jusqu'au repère correct
		DE	Messröhrchen mit Wasser füllen bis zur richtigen Markierung
		NL	Testtube vullen met water tot juiste markering
		ES	Llenar la probeta con agua hasta la marca correcta
		IT	Riempire la provetta con acqua fino alla tacca corretta
		SV	Fyll provröret med vatten upp till rätt märkning
		ZH	将试管中加水直到标记处
③		EN	Add titration solution drop by drop while swirling test tube
		FR	Ajouter la solution de titrage goutte à goutte en agitant l'éprouvette
		DE	Unter Schütteln des Messröhrchen, Titrationslösung tropfenweise zusetzen
		NL	Titreervloeistof druppelsgewijs toevoegen en terwijl testtube schudden
		ES	Añadir gota a gota la solución de titulación en agitando la probeta
		IT	Aggiungere il titolante goccia a goccia agitando la provetta
		SV	Tillsätt titreringslösningen dropp för droppe medan det virvlar i provröret
		ZH	边滴入试剂边摇动试管
④		EN	Count drops until color changes from RED to GREEN
		FR	Compter les gouttes jusqu'à ce que la couleur change de ROUGE à VERT
		DE	Tropfen zählen bis zum Farbumschlag von ROT nach GRÜN
		NL	Druppels tellen tot kleuromslag van ROOD naar GROEN
		ES	Contar gotas hasta cambio de color de ROJO a VERDE
		IT	Contare gocce fino al cambiamento di colore da ROSSO a VERDE
		SV	Räkna droppar tills färgen ändras från RÖD till GRÖN
		ZH	记录滴入试管中的试剂滴数。当水的颜色从红变绿时停止；水滴数量 = 水硬度

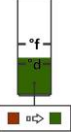